

ОАО «Новоаннинский завод
электроmedizinической аппаратуры»

**АППАРАТ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ТОКАМИ
НАДТОНАЛЬНОЙ ЧАСТОТЫ, МЕСТНОЙ ДАРСОНВАЛИЗАЦИИ,
ГАЛЬВАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ ЭЛЕКТРОФОРЕЗА
«УльтраДар–ЭМА-Н»**

ПАСПОРТ
НА65-00-000 ПС

г. Новоаннинский

Приложение Е

Регистрационное удостоверение № РЗН 2016/5209 от 08.02.2017 г.
выдано Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения
(Росздравнадзор). Срок действия неограничен.

ОАО «Новоаннинский завод электро медицинской аппаратуры»
403953, Волгоградская обл., г. Новоаннинский, пер. Красные Баррикады, 32
Телефоны: приемная 3-48-30; бухгалтерия 3-50-71; отдел сбыта 3-48-71
тел/факс: (84447) 3-48-30, 3-46-68.
www.nzema.ru E-mail: nzema@narod.ru

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН № 1

на ремонт в течение гарантийного срока медицинского изделия

**Аппарат для лечения токами надтональной частоты, местной
дарсонвализации, гальванизации и проведения электрофореза**

**«УльтраДар-ЭМА-Н»
по ТУ 9444-015-3471123/8-2014**

Заводской номер _____

Дата выпуска _____

Приобретен _____

(дата, подпись и штамп торгующей организации)

Введен в эксплуатацию _____

(владелец, дата, подпись)

Принят на гарантийное обслуживание ремонтным предприятием города:

Руководитель ремонтного
предприятия _____

(Ф.И.О., подпись)

М.П.

Руководитель учреждения-владельца _____

(Ф.И.О., подпись)

М.П.

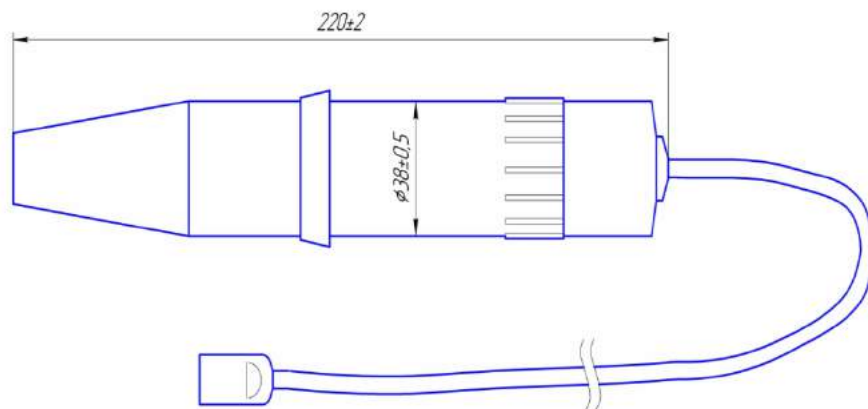


Рисунок 7. Резонатор.

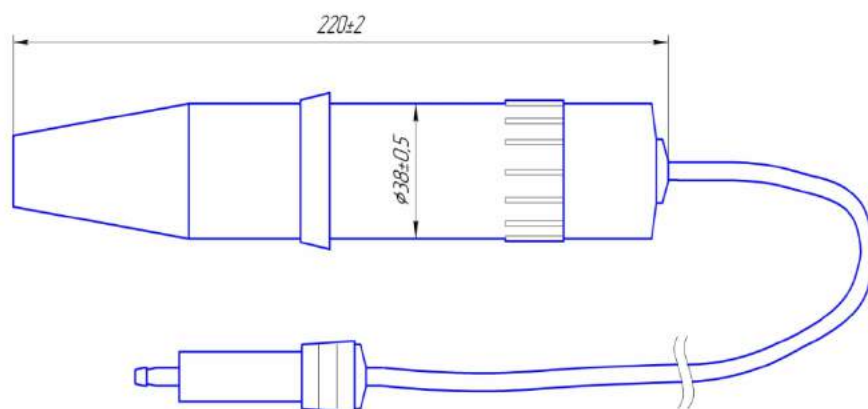


Рисунок 8. Электрододержатель.

1. Введение	3
2. Назначение	3
3. Технические характеристики	3
4. Комплект поставки	5
5. Устройство и принцип работы аппарата	8
6. Указания мер безопасности	10
7. Подготовка аппарата к работе	11
8. Порядок работы	12
9. Показания для применения аппарата	15
10. Противопоказания	16
11. Техническое обслуживание	17
12. Текущий ремонт	19
13. Свидетельство об упаковывании	21
14. Свидетельство о приемке	21
15. Гарантии изготовителя	21
16. Сведения о рекламациях	21
17. Сведения о консервации, упаковке, транспортировании и хранении	21
18. Утилизация	21
19. Сведения о национальных стандартах	22
Приложение А. Перечень оборудования, необходимого для ремонта и технического обслуживания аппарата	23
Приложение Б. Индикатор частоты	24
Приложение В. Схема электрическая функциональная для измерения выходного тока аппарата	25
Приложение Г. Схема проверки частоты и непрерывности высокочастотных колебаний	26
Схема проверки выходной мощности	26
Изображение высокочастотных колебаний на экране осциллографа	26
Приложение Д. Габаритные размеры электродов, резонатора, электрододержателя	27
Приложение Е. Гарантийный талон № 1	30

1 ВВЕДЕНИЕ

Настоящий паспорт предназначен для ознакомления с устройством и принципом работы многофункционального аппарата для лечения токами надтональной частоты, местной дарсонвализации, гальванизации и проведения электрофореза «УльтраДар-ЭМА-Н» (в дальнейшем – аппарат) и руководства при его эксплуатации.

НЕ ПРИСТУПАТЬ К РАБОТЕ, НЕ ОЗНАКОМИВШИСЬ С ПАСПОРТОМ!

2 НАЗНАЧЕНИЕ

2.1 Аппарат предназначен: для местного воздействия высокочастотным током при гинекологических, проктологических и дерматологических заболеваниях; для лечения высокочастотным током высокого напряжения и малой силы тока неврологических, дерматологических, стоматологических, отоларингологических, проктологических, гинекологических заболеваний; для воздействия постоянным током на организм человека с лечебными и профилактическими целями и проведения лекарственного электрофореза в лечебных и оздоровительных учреждениях различного профиля.

2.2 Аппарат применяется в лечебных и оздоровительных учреждениях различного профиля.

В зависимости от потенциального риска применения аппарат относится к классу – 2 б.

2.3 Аппарат предназначен для работы при температурах окружающего воздуха от +10°C до + 35°C, относительной влажности воздуха до 80% (при температуре +25°C) и атмосферном давлении от 84 (630) до 106,7 (800) кПа (мм рт.ст.).

Вид климатического исполнения УХЛ 4.2 ГОСТ 15150-69.

3 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

3.1 Процедуру проводить одновременно только одному пациенту.

3.2 В режиме лечения токами надтональной частоты «УЛЬТРАТОНОТЕРАПИЯ».

3.2.1 Частота непрерывных высокочастотных колебаний $(22 \pm 1,65)$ кГц.

3.2.2 Наибольшая выходная мощность аппарата (10 ± 2) Вт на активном сопротивлении эквивалента нагрузки, представляющего собой последовательно включенные резистор $(15 \pm 0,75)$ кОм и конденсатор $(47 \pm 4,7)$ пФ.

3.3 В режиме «ДАРСОНВАЛИЗАЦИЯ».

3.3.1 Частота высокочастотных импульсно-модулированных колебаний $(110 \pm 8,25)$ кГц. Частота модуляции (50 ± 5) Гц или (100 ± 10) Гц.

3.3.2 Максимальная величина тока на выходе аппарата при установленной до отказа ручки регулятора «МОЩНОСТЬ» $(4 \pm 1,2)$ мА при любых электродах, кроме ушных, носовых и десенных. Максимальная величина тока при ушных, носовых и десенных электродах (3 ± 1) мА.

3.4 В режиме «ГАЛЬВАНИЗАЦИЯ».

3.4.1 Максимальная величина тока в цепи пациента при работе аппарата (50 ± 5) мА при номинальной нагрузке равной $500 \text{ Ом} \pm 25 \text{ Ом}$.

Продолжение приложения Д

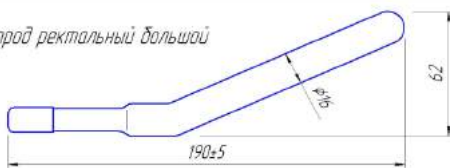
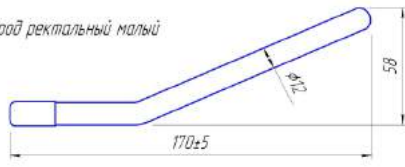
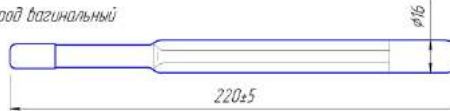
1		Длина вводимой части 50–70 мм
2		Длина вводимой части 50–70 мм
3		Длина вводимой части 10–115 мм
4		Длина вводимой части 10 мм
5		Длина вводимой части 100–120 мм
6		
7		
8		

Рисунок 6 – Electrodes gas-discharge for darsonvalization

Приложение Д

Габаритные размеры электродов, резонатора, электрододержателя

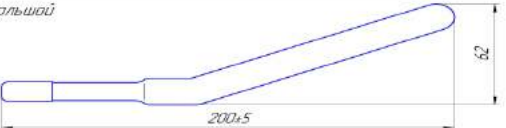
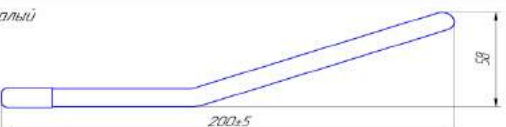
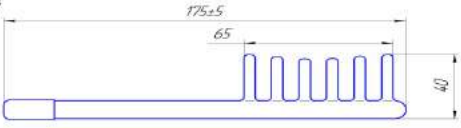
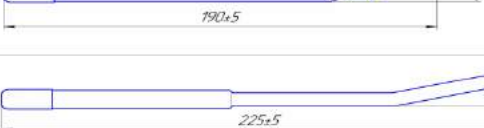
1	Электрод полостной большой	
2	Электрод полостной малый	
3	Электрод гребешковый	
4	Электрод грибовидный большой	
5	Электрод грибовидный малый	
6	Электрод ушной	
7	Электрод десенный	
8	Электрод вагинальный	
9	Электрод носовой	

Рисунок 5 Электроды газоразрядные для ультратонотерапии

- 3.4.2 Диапазоны регулировки тока в режиме «ГАЛЬВАНИЗАЦИЯ» должны быть $(0-5) \pm 1$ мА или $(0-50) \pm 5$ мА.
- 3.5 Регулятор «МОЩНОСТЬ» обеспечивает плавное изменение выходного тока от нуля до максимального значения при помощи переменного резистора.
- 3.6 Время установления рабочего режима не более 1 мин.
- 3.7 Аппарат допускает работу в режиме «УЛЬТРАТОНОТЕРАПИЯ» в непродолжительном режиме с рабочим циклом: 20 мин работы с наибольшим выходным током с электродом полостным большим, 5 мин перерыв с выведенной в крайнее левое положение ручкой регулятора «МОЩНОСТЬ» без выключения аппарата из сети в течение 8 час.
- 3.8 Аппарат допускает работу в режиме «ДАРСОНВАЛИЗАЦИЯ» в непродолжительном режиме с рабочим циклом: 20 мин. работы, 10 мин. перерыв в течение 8 час.
- 3.9 Аппарат допускает работу в режиме «ГАЛЬВАНИЗАЦИЯ» в непродолжительном режиме с рабочим циклом: 30 мин. работы, 5 мин. перерыв в течение 8 час.
- 3.10 При включении сети, переключении режимов работы и переключении диапазонов тока блокировочное устройство исключает возможность подачи выходного тока в цепь пациента при установке ручки регулятора выходного тока «МОЩНОСТЬ» в не крайнее левое положение. Это требование выполняется также после прерывания и восстановления сетевого питания. О срабатывании защиты свидетельствует высвечивание на индикаторе «ТАЙМЕР» надписи «Er».
- 3.11 Защитное устройство аппарата в режиме «ГАЛЬВАНИЗАЦИЯ» отключает цепь пациента при токе, превышающем наибольшее значение постоянной составляющей выходного тока на 5 мА при номинальной нагрузке равной $500 \text{ Ом} \pm 25 \text{ Ом}$.
- 3.12 Аппарат работает от сети переменного тока частоты $(50 \pm 0,5)$ Гц с номинальным напряжением сети 220 В при допустимых отклонениях напряжения сети на ± 22 В от номинального значения.
- 3.13 По защите от поражения электрическим током аппарат выполнен по классу 1, рабочая часть типа BF (символ ).
- 3.14 Степень защиты аппарата, обеспечиваемая оболочками, от проникновения твердых предметов и от проникновения воды – IPX0 по ГОСТ 14254-2015.
- 3.15 Аппарат не предназначен для работы в среде с повышенным содержанием кислорода по ГОСТ Р МЭК 60601-1-2010.
- 3.16 Мощность, потребляемая аппаратом из сети, не превышает 50 В•А.
- 3.17 Таймер установки длительности процедуры обеспечивает интервал времени 1-99 мин с дискретностью 1 мин, а также выключение выходного тока по истечении установленного времени с подачей звукового сигнала.
- 3.18 Габаритные размеры аппарата: 300х 280х115 мм.
- 3.19 Масса аппарата, без принадлежностей 3 кг.
- 3.20 Нарботка на отказ не менее 1250 часов условно-непрерывной работы.
- 3.21 Средний срок службы 5 лет.

3.22 Корпус аппарата, корпус резонатора и электрододержателя, колодка разъема резонатора, корпус штекера электрододержателя должны изготавливаться из полистирола УПМ 0508 ГОСТ 28250-89, кольцо резонатора, кольцо электрододержателя и кабель пациента для углетканевых электродов - ПВХ пластикат ИО45-12 ГОСТ 5960-72, электроды физиотерапевтические с токопроводящей углеродной тканью ЭТУ-«МИКОН» - фланель отбеленная ГОСТ 29298-2005 и углеродная ткань марки УУТ-2 ТУ 6-06 И 78-85, гидрофильные хлопчатобумажные прокладки - фланель отбеленная ГОСТ 29298-2005, свинцовые электроды - лист свинцовый марки С1 ГОСТ 9559-89, электроды газоразрядные - стекло марки С52-1 ОСТ 11ПО.735.002-73 и цоколь электродов - лента ДПРНМ НД Л68 ГОСТ 2208-2007, материал должен соответствовать токсикологическим нормам.

3.23 В аппарате должны быть использованы плавкие предохранители в количестве 2 штук со следующими характеристиками: тип – вставка плавкая ВП1-1, рабочее напряжение – 250 В, рабочий ток – 1 А, ток срабатывания – 2 А, время срабатывания – 1,0 сек. Тип доступа к предохранителям – при помощи инструмента.

3.24 Сведения о содержании драгоценных материалов и цветных металлов.

3.24.1 Драгоценных материалов в аппарате не содержится.

3.24.2 Содержание цветных металлов и их сплавов:

алюминий – 0,08 кг; медь – 0,12 кг; латунь – 0,03 кг.

4 КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

4. 1 Комплект поставки аппарата соответствует указанному в таблице 1.

Таблица 1 – Комплект поставки аппарата

Наименование	Обозначение документа	Кол-во, шт
1. Аппарат для лечения токами над-тональной частоты, местной дарсонвализации, гальванизации и проведения электрофореза «УльтраДар–ЭМА-Н»	НА65-00-000	1
2. Электрододержатель	НА20-46-000	1
3. Электроды газоразрядные для ультратонотерапии:		
электрод грибовидный большой	ПКВБ.940319.001 ТУ	1
электрод грибовидный малый	ПКВБ.940319.001 ТУ	1
электрод гребешковый	ПКВБ.940319.001 ТУ	1
электрод вагинальный	ПКВБ.940319.001 ТУ	1
электрод десенный	ПКВБ.940319.001 ТУ	1
электрод полостной большой	ПКВБ.940319.001 ТУ	1
электрод полостной малый	ПКВБ.940319.001 ТУ	1
электрод ушной	ПКВБ.940319.001 ТУ	1
электрод носовой*	ПКВБ.940319.001 ТУ	1
4. Резонатор	тД5.435.001	1

Приложение Г

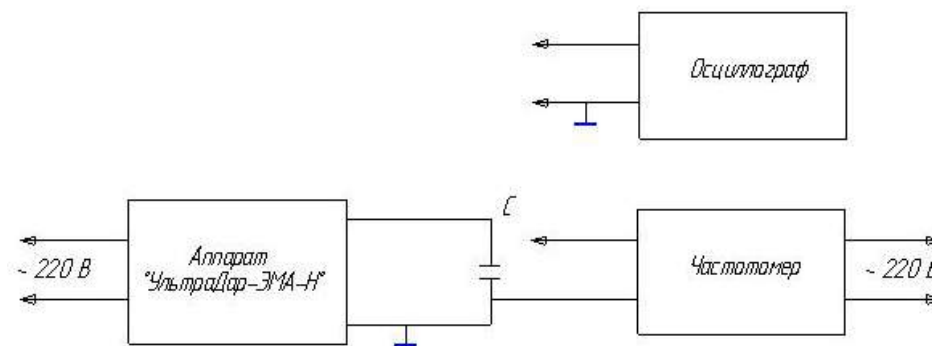


Рис. 1 Схема проверки частоты и непрерывности высокочастотных колебаний

C – конденсатор К15У-1а-6 кВ – 100 пф ± 10 % – 7 квар

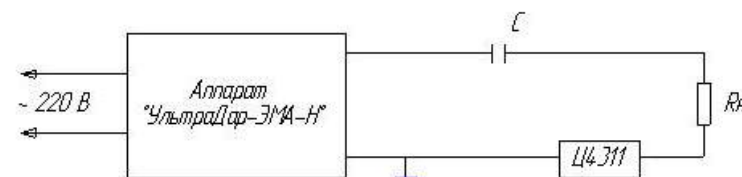


Рис. 2 Схема проверки выходной мощности

C – конденсатор К15У-1а-6 кВ-47 пф±10 % -7 квар;
Rн – резистор ТВО-20-15 кОм ± 5 %;
Ц4311 - Ампервольтомметр Ц4311

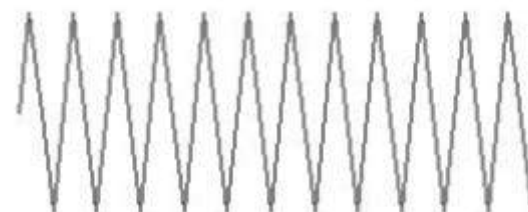


Рис. 3 Изображение высокочастотных колебаний на экране осциллографа


4 Порядок работы

- 4.1 Подключите индикатор частоты к выходу аппарата с помощью розетки со шнуром X2, а резонатор подключите к вилке X1.
- 4.2 Включите аппарат в сеть.
- 4.3 После прогрева аппарата установите ручку регулятора «МОЩНОСТЬ» в положение максимальной интенсивности.
- 4.4 Ручкой конденсатора С3 с лимбом добейтесь резонанса по прибору Р индикатора. При отсутствии резонанса, переключателем включите дополнительный конденсатор С4*.
- 4.5 Частота настройки аппарата должна находиться в секторе лимба, ограниченном оцифрованными значениями 101,75 и 118,25 кГц.

Приложение В

СХЕМА

электрическая функциональная для измерения выходного тока аппарата

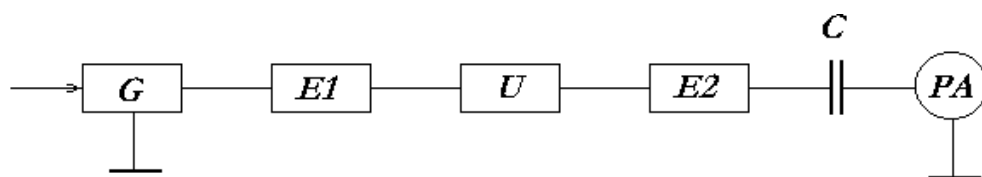

G – аппарат «УльтраДар-ЭМА-Н»;

E1 – резонатор ;

U – электрод;

E2 – изолированный металлический сосуд с водой
диаметром 100±20мм;

C – конденсатор 80±10 пф, 16 кВ;

PA – термомиллиамперметр типа Т203, 10мА кл. 1,0.

Продолжение таблицы 1

5. Электроды газоразрядные для дарсонвализации:		
электрод грибовидный большой	ПКВБ.940319.002 ТУ	1
электрод грибовидный малый	ПКВБ.940319.002 ТУ	1
электрод гребешковый	ПКВБ.940319.002 ТУ	1
электрод вагинальный	ПКВБ.940319.002 ТУ	1
электрод десенный	ПКВБ.940319.002 ТУ	1
электрод ректальный большой	ПКВБ.940319.002 ТУ	1
электрод ректальный малый	ПКВБ.940319.002 ТУ	1
электрод ушной	ПКВБ.940319.002 ТУ	1
электрод носовой*	ПКВБ.940319.002 ТУ	1
6. Кабель пациента для углеродных электродов, длина 2000 мм	НА6.644.007	2
7. Электроды физиотерапевтические с токопроводящей углеродной тканью ЭТУ-«МИКОН для гальванизации:	ТУ 9398-001-25905050-2003 Рег. удостоверение № ФСР 2008/03039 от 14.07.2008	
прямоугольный 30х60 мм*	ТУ 9398-001-25905050-2003	2
прямоугольный 30х100 мм*	ТУ 9398-001-25905050-2003	2
прямоугольный 40х50 мм*	ТУ 9398-001-25905050-2003	2
прямоугольный 40х110 мм*	ТУ 9398-001-25905050-2003	2
прямоугольный 40х150 мм*	ТУ 9398-001-25905050-2003	2
прямоугольный 40х170 мм*	ТУ 9398-001-25905050-2003	2
прямоугольный 50х50 мм*	ТУ 9398-001-25905050-2003	2
прямоугольный 50х70 мм*	ТУ 9398-001-25905050-2003	2
прямоугольный 50х100 мм*	ТУ 9398-001-25905050-2003	2
прямоугольный 50х200 мм*	ТУ 9398-001-25905050-2003	2
прямоугольный 60х80 мм*	ТУ 9398-001-25905050-2003	2
прямоугольный 60х100 мм	ТУ 9398-001-25905050-2003	2
прямоугольный 60х120 мм*	ТУ 9398-001-25905050-2003	2
прямоугольный 60х170 мм*	ТУ 9398-001-25905050-2003	2
прямоугольный 60х200 мм*	ТУ 9398-001-25905050-2003	2
прямоугольный 70х70 мм*	ТУ 9398-001-25905050-2003	2
прямоугольный 70х110 мм*	ТУ 9398-001-25905050-2003	2
прямоугольный 70х230 мм*	ТУ 9398-001-25905050-2003	2
прямоугольный 80х100 мм*	ТУ 9398-001-25905050-2003	2
прямоугольный 80х120 мм	ТУ 9398-001-25905050-2003	2
прямоугольный 80х160 мм*	ТУ 9398-001-25905050-2003	2
прямоугольный 80х200 мм*	ТУ 9398-001-25905050-2003	2
прямоугольный 80х250 мм*	ТУ 9398-001-25905050-2003	2
прямоугольный 90х140 мм*	ТУ 9398-001-25905050-2003	2
прямоугольный 100х100 мм*	ТУ 9398-001-25905050-2003	2
прямоугольный 100х150 мм	ТУ 9398-001-25905050-2003	2
прямоугольный 100х200 мм*	ТУ 9398-001-25905050-2003	2

Продолжение таблицы 1

прямоугольный 100x250 мм*	ТУ 9398-001-25905050-2003	2
прямоугольный 120x170 мм*	ТУ 9398-001-25905050-2003	2
прямоугольный 130x190 мм*	ТУ 9398-001-25905050-2003	2
прямоугольный 140x500 мм*	ТУ 9398-001-25905050-2003	2
прямоугольный 150x200 мм*	ТУ 9398-001-25905050-2003	2
прямоугольный 160x250 мм*	ТУ 9398-001-25905050-2003	2
прямоугольный 170x290 мм*	ТУ 9398-001-25905050-2003	2
прямоугольный 200x300 мм*	ТУ 9398-001-25905050-2003	2
прямоугольный 300x300 мм*	ТУ 9398-001-25905050-2003	2
воротниковый № 1, 160x300 мм*	ТУ 9398-001-25905050-2003	2
воротниковый № 2, 240x320 мм*	ТУ 9398-001-25905050-2003	2
воротниковый № 3, 250x440 мм*	ТУ 9398-001-25905050-2003	2
воротниковый № 4, 380x430 мм*	ТУ 9398-001-25905050-2003	2
трехлопастной №1, 120x170 мм*	ТУ 9398-001-25905050-2003	2
трехлопастной №2, 160x190 мм*	ТУ 9398-001-25905050-2003	2
ушной № 1, 90x100 мм*	ТУ 9398-001-25905050-2003	2
ушной № 2, 110x130 мм*	ТУ 9398-001-25905050-2003	2
горловой № 1, 70x110 мм*	ТУ 9398-001-25905050-2003	2
горловой № 2, 100x150 мм*	ТУ 9398-001-25905050-2003	2
грудной (кольцо) диаметр 160x50 мм*	ТУ 9398-001-25905050-2003	2
круг диаметр 50 мм*	ТУ 9398-001-25905050-2003	2
8. Провод пациента одинарный с зажимом, длина 2000 мм*	НА60-30-000	2
9. Провод пациента раздвоенный с зажимами, длина 2000 мм*	НА60-31-000	2
10. Электрод свинцовый 40x50 мм*	Э27-70-02	2
11. Электрод свинцовый 60x100 мм*	ЭНД5-48	2
12. Электрод свинцовый 100x150 мм*	Э27-70-04	2
13. Гидрофильная хлопчатобумажная прокладка, прямоугольная 40x50 мм*	ТУ 9444-010-18614665-2012 Рег. удостоверение № РЗН 2014/1776 от 08.08.2014 г.	2
14. Гидрофильная хлопчатобумажная прокладка, прямоугольная 60x100 мм*	ТУ 9444-010-18614665-2012 Рег. удостоверение № РЗН 2014/1776 от 08.08.2014 г.	2
15. Гидрофильная хлопчатобумажная прокладка, прямоугольная 100x150 мм*	ТУ 9444-010-18614665-2012 Рег. удостоверение № РЗН 2014/1776 от 08.08.2014 г.	2
16. Бинт Мартенса резиновый*	ТУ У6-00152253.006-95 Рег. удостоверение № ФСЗ 2008/01231 от 17.03.2008 г.	1
17. Вставка плавкая ВП1-1-1А	ОЮО.480.003 ТУ	2
18. Паспорт	НА65-00-000 ПС	1 экз.

* - Поставляются по дополнительной заявке заказчика

Приложение Б ИНДИКАТОР ЧАСТОТЫ

1 Назначение

Индикатор частоты предназначен для контроля и настройки аппарата.


2 Технические характеристики

2.1 Диапазон частот 100-120 КГц.

2.2 Относительная погрешность индикатора на оцифрованных значениях 101,75 и 118,25 КГц не более 0,5%.

2.3 Напряжение контролируемого сигнала не менее 1 В.

3 Схема электрическая принципиальная

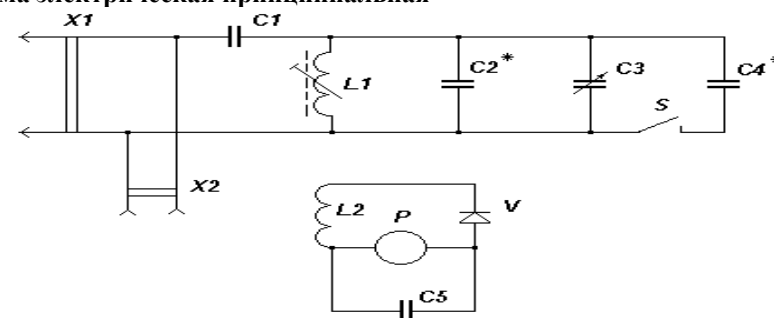

* подбирается при регулировании.

ПЕРЕЧЕНЬ ЭЛЕМЕНТОВ

Обозначение	Наименование	Кол-во, шт.	Прим.
	Конденсаторы КСО ОЖО.461.123 ТУ		
	Конденсаторы МБМ ОЖО.462.147 ТУ		
C	КСО-1-250 В-Г-200 пф±5%	1	
C2*	КСО-5-500 В-Г-3900 пф±5%	1	
C3	Конденсатор переменной емкости 10-500 пф (44 пластины, площадь 1 пластины 18,1 см ² , расстояние между пластинами 1,5мм)	1	
C4	КСО-1-250 В-Г-620 пф±5%	1	
C5	МБМ-160 В-1,0 мкФ ±20%	1	
P	Микроамперметр М4204 О-100 мкА ТУ 25-04-1123-73	1	
S	Тумблер ТВ2-1 УСО.360.049 ТУ	1	
L1, L2	Катушка индуктивности Э42-16-00	1	
V	Диод Д2Е СМЗ.362.004 ТУ	1	
X1	Вилка Э42-26-00	1	
X2	Розетка со шнуром Э42-61-00 В	1	

Приложение А
Перечень оборудования, необходимого для
ремонта и технического обслуживания аппарата

Наименование	Основные характеристики или обозначение документа
1. Частотомер электронно-счетный	Диапазон частот 10 Гц - 3,5 МГц. Основная погрешность измерения не более $\pm 2,5 \%$
2. Амперметр переменного тока	Класс точности 1,0. Предел измерения 0-1 А. Частота 45-50 Гц.
3. Вольтметр переменного тока	Класс точности 1,0. Предел измерения 0-300 В. Частота 45-50 Гц.
4. Миллиамперметр постоянного тока	Предел измерения 100 мА. Класс точности 1,5.
5. Ампервольтметр Ц4311	ТУ 25- 04-3166-76. Предел измерения силы переменного тока 3-7,5 - 15-30 мА. Основная погрешность не более $+ 1 \%$
6. Термомилиамперметр Т203	Предел измерения 10 мА. Класс точности 1,0.
7. Осциллограф универсальный	GDS-2064
8. Сосуд металлический для воды	Диаметр 100 ± 20 мм. Высота 150 мм.
9. Автотрансформатор ЛАТР	Регулируемое напряжение от 0 до 250 В. Максимальный ток 2 А.
10. Мегомметр	ГОСТ 23706-93. Класс точности 1,5. Номинальное напряжение 1000 В.
11. Сопротивление нагрузки	Резистор МЛТ-2-500 Ом ± 25 Ом.
12. Индикатор частоты	Приложение Б

Примечание: Допускается использовать измерительные приборы других типов, обеспечивающие необходимую точность измерения.

5 УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ АППАРАТА

- 5.1 Аппарат представляет собой multifunctional устройство, включающее в себя генератор непрерывных высокочастотных колебаний ($22 \pm 1,65$ кГц) с высоковольтным выходом, генератор высокочастотных модулированных импульсных колебаний ($110 \pm 8,25$ кГц) с частотой модуляции (50 ± 5) Гц и (100 ± 10) Гц и источник постоянного тока от 0 до 50 мА.
- 5.2 Аппарат смонтирован в пластмассовом корпусе и представляет собой настольную переносную конструкцию. Аппарат состоит из основания и верхней крышки. Внутри аппарата установлены плата управления и индикации, два генератора и силовой блок. Сетевой выключатель расположен на задней стороне аппарата. Выходной разъем для подключения резонатора при работе аппарата в режиме «ДАРСОНВАЛИЗАЦИЯ» расположен на левой боковой части аппарата. Выходной разъем для подключения электрододержателя при работе аппарата в режиме «УЛЬТРАТОНОТЕРАПИЯ» расположен на правой боковой части аппарата.
- 5.3 На лицевой панели аппарата расположены органы управления и контроля, а также выходные гнезда для подключения электродов «ГАЛЬВАНИЗАЦИЯ».

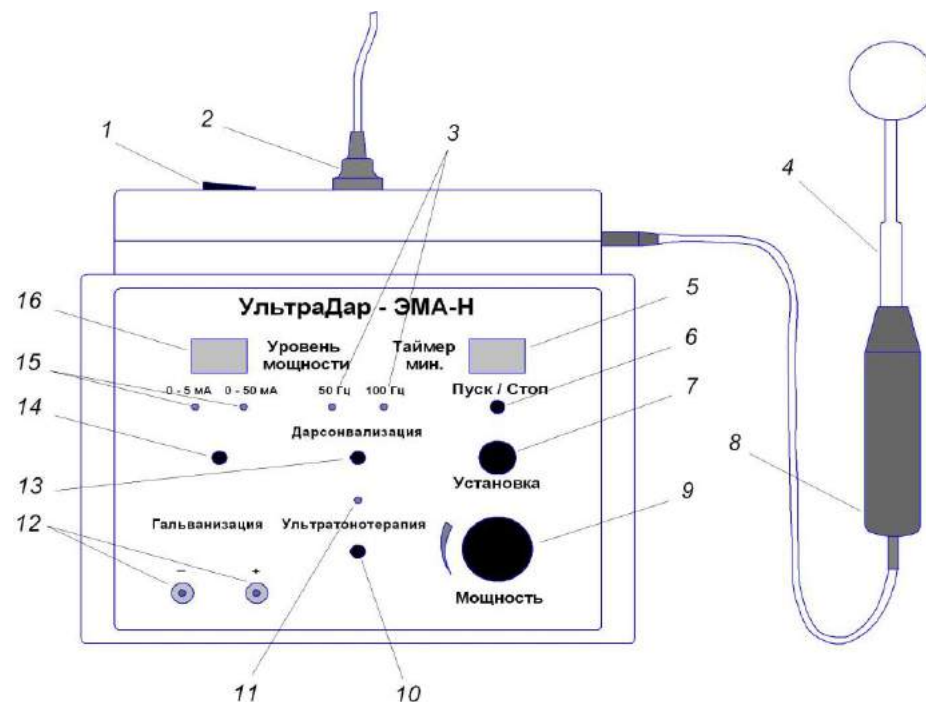


Рисунок 1 - Аппарат для лечения токами надтональной частоты, местной дарсонвализации, гальванизации и проведения электрофореза «УльтраДар-ЭМА-Н».

1 – клавиша «СЕТЬ», 2 – сетевой шнур, 3 – светодиоды частоты модуляции «50 Гц» и «100 Гц» в режиме «ДАРСОНВАЛИЗАЦИЯ», 4 – электрод газоразрядный, 5 – индикатор «ТАЙМЕР», 6 – кнопка таймера «ПУСК/СТОП», 7 – ручка «УСТАНОВКА» таймера, 8 – электрододержатель, 9 – регулятор «МОЩНОСТЬ», 10 – кнопка выбора режима «УЛЬТРАТОНОТЕРАПИЯ», 11 – индикатор включения режима «УЛЬТРАТОНОТЕРАПИЯ», 12 – выходные гнезда «+» и «-» для подключения электродов в режиме «ГАЛЬВАНИЗАЦИЯ», 13 – кнопка включения и выбора режима «ДАРСОНВАЛИЗАЦИЯ», 14 – кнопка включения и выбора режима «ГАЛЬВАНИЗАЦИЯ», 15 – кнопки выбора диапазона выходного тока «0-5 мА» и «0-50 мА» в режиме «ГАЛЬВАНИЗАЦИЯ», 16 – индикатор выходного тока «УРОВЕНЬ МОЩНОСТИ» в режиме «ГАЛЬВАНИЗАЦИЯ».

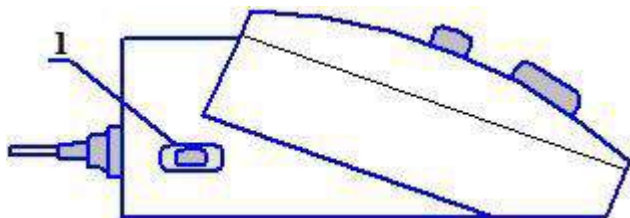


Рисунок 2 - Аппарат для лечения токами надтональной частоты, местной дарсонвализации, гальванизации и проведения электрофореза «УльтраДар-ЭМА-Н». Вид слева.

1 - выходной разъем для подключения резонатора при работе аппарата в режиме «ДАРСОНВАЛИЗАЦИЯ».

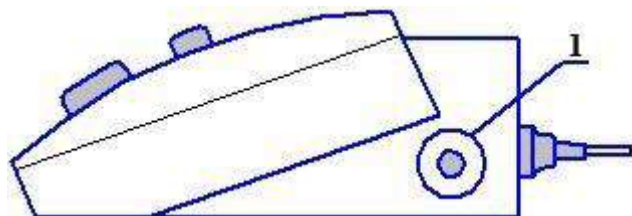


Рисунок 3 - Аппарат для лечения токами надтональной частоты, местной дарсонвализации, гальванизации и проведения электрофореза «УльтраДар-ЭМА-Н». Вид справа.

1- выходной разъем для подключения электрододержателя при работе аппарата в режиме «УЛЬТРАТОНОТЕРАПИЯ».

мических (профилактических) мероприятий» относится к классу А (эпидемиологически безопасные отходы, по составу приближенные к ТКО).

18.2 Утилизация отработавших срок службы и вышедших из строя аппаратов должна осуществляться в соответствии с действующими на момент утилизации государственными правилами по утилизации медицинских отходов в соответствии с их классом опасности.

19 СВЕДЕНИЯ О НАЦИОНАЛЬНЫХ СТАНДАРТАХ

19.1 Национальные стандарты, распространяющиеся на аппарат:

ГОСТ Р 50444-2020 Приборы, аппараты и оборудование медицинские. Общие технические условия.

ГОСТ Р МЭК 60601-1-2010 Изделия медицинские электрические. Часть 1. Общие требования безопасности с учетом основных функциональных характеристик.

ГОСТ Р МЭК 60601-1-2-2014 Изделия медицинские электрические. Часть 1-2. Общие требования безопасности с учетом основных функциональных характеристик. Параллельный стандарт. Электромагнитная совместимость. Требования и испытания.

ГОСТ 31508-2012 Классификация в зависимости от потенциального риска применения. Общие требования.

ГОСТ 9.014-78 ЕСЗКС. Временная противокоррозионная защита изделий. Общие требования.

ГОСТ 15150-69 Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категория, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды.

ГОСТ Р ISO 15223-1-2020 Изделия медицинские. Символы, применяемые при маркировании медицинских изделий на этикетках и в сопроводительной документации. Часть 1. Основные требования.

ГОСТ ISO 14971-2011 Изделия медицинские. Применение менеджмента риска к медицинским изделиям.

ГОСТ ISO 10993-1-2011 Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 1. Оценка и исследования.

ГОСТ Р МЭК 60601-1-6-2014 Изделия медицинские электрические. Часть 1-6. Общие требования безопасности с учетом основных функциональных характеристик. Дополнительный стандарт. Эксплуатационная пригодность.

ГОСТ 14254-2015 Степени защиты, обеспечиваемые оболочками (Код IP)

15 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

- 15.1 Изготовитель гарантирует соответствие аппарата ТУ 9444-015-34711238-2014 при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения.
- 15.2 Гарантийный срок эксплуатации аппарата – 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, а при отсутствии акта ввода в эксплуатацию – 12 месяцев со дня продажи.
- 15.3 Гарантийный срок хранения аппарата 12 месяцев с даты изготовления.
- 15.4 Предприятие-изготовитель обязуется в течение гарантийного срока бесплатно устранять дефекты или заменять вышедшие из строя части аппарата, либо весь аппарат по предъявлении гарантийного талона.
- 15.5 **При нарушении пломб на аппарате, механических повреждениях вследствие удара или падения аппарата при транспортировке, а также при эксплуатации аппарата с нарушением правил руководства по эксплуатации, ремонт производится за счет потребителя.**

16 СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ

- 16.1 В случае отказа аппарата в работе или неисправности его в период гарантийных обязательств, а также обнаружения некомплектности при первичной приемке аппарата, потребитель должен обратиться на завод-изготовитель по электронной почте nzema@narod.ru или по телефону (84447) 3-50-13, 3-48-30.
- 16.2 Аппарат принимается на ремонт со следующими документами: паспорт на изделие с отметкой даты продажи и ввода в эксплуатацию, акт ввода в эксплуатацию, акт неисправности с указанием характера неисправности или некомплектности, данные отправителя (наименование фирмы, адрес, ИНН, телефон, контактное лицо).

17 СВЕДЕНИЯ О КОНСЕРВАЦИИ, УПАКОВКЕ, ТРАНСПОРТИРОВАНИИ И ХРАНЕНИИ

- 17.1 Аппарат законсервирован в соответствии с требованиями ГОСТ 9.014-78 и ТУ 9444-015-34711238-2014.
- Предельный срок защиты без переконсервации – 5 лет.
- 17.2 Аппарат упакован в соответствии с требованиями ТУ 9444-015-34711238-2014.
- 17.3 Транспортирование упакованного аппарата производить всеми видами крытых транспортных средств в соответствии с требованиями ГОСТ Р 50444-2020. Условия транспортирования аппарата по группе 5 ГОСТ 15150-69.
- 17.4 Аппарат должен храниться в закрытом помещении при температуре от +5 до +40°C и относительной влажности до 80% при температуре +25°C.
- Воздух в помещении не должен содержать примесей, вызывающих коррозию.

18 УТИЛИЗАЦИЯ

- 18.1 Аппарат в соответствии с СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению населения, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпиде-

5.4 На заднюю панель аппарата нанесена маркировка:

- наименование предприятия-изготовителя;
- товарный знак предприятия-изготовителя;
- наименование аппарата;



- символ «Обратитесь к инструкции по эксплуатации».



- символ «Осторожно!» - указывает на необходимость для пользователя, ознакомиться с информацией инструкции по эксплуатации;
- обозначение технических условий, по которым изготовлен аппарат;
- серийный номер аппарата и год выпуска;
- 220 В, 50 Гц (номинальное напряжение питания и частота);
- 30 В•А (потребляемая мощность);
- - символ классификации по электробезопасности: рабочая часть типа BF в соответствии с ГОСТ Р МЭК 60601-1-2010;
- номер и дата регистрационного удостоверения Росздравнадзора;
- режим работы: «УЛЬТРАТОНОТЕРАПИЯ»: 20 минут работы, 5 минут перерыв; «ДАРСОНВАЛИЗАЦИЯ»: 20 минут работы, 10 минут перерыв; «ГАЛЬВАНИЗАЦИЯ»: 30 минут работы, 5 минут перерыв (изделие с непродолжительным режимом работы);

6 УКАЗАНИЯ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

- 6.1 По электробезопасности аппарат соответствует требованиям ГОСТ Р МЭК 60601-1-2010 и выполнен по классу защиты 1, рабочая часть типа BF.
- ОСТОРОЖНО: Во избежание риска поражения электрическим током аппарат должен присоединяться только к сетевому питанию, имеющему защитное заземление.**
- 6.2 К работе с аппаратом допускаются лица, изучившие настоящий паспорт, инструкцию по технике безопасности при работе с изделиями данного вида, а также прошедшие аттестацию и инструктаж по безопасности труда.
- 6.3 При эксплуатации аппарата необходимо соблюдать следующие меры предосторожности:
- 1) перед включением аппарата в сеть обслуживающий персонал обязан визуально проверить исправность сетевого шнура и соединения заземляющего контура с сетевой розеткой;
 - 2) **ВНИМАНИЕ:** включение аппарата в сеть, а также переключение режимов работы, диапазонов выходного тока производить только при крайнем левом положении ручки регулятора «МОЩНОСТЬ»;
 - 3) аппарат сохраняет работоспособность в режиме гальванизации в режиме короткого замыкания в течение не более 1 мин, а в режиме холостого хода в течении не более 10 мин;
 - 4) штекеры кабеля пациента должны плотно входить в выходные гнезда разъемов;
 - 5) пациент не должен иметь соприкосновение с заземляющими предметами, а предметы, на которых располагается пациент, должны быть выполнены из токонепроводящего материала;
 - 6) **ВНИМАНИЕ:** наложение электродов и их смена должна производиться только в

паузах между процедурами и при крайнем левом положении ручки регулятора «МОЩНОСТЬ»;

- 7) **ВНИМАНИЕ:** при проведении процедур в режиме «УЛЬТРАТОНОТЕРАПИЯ» и «ДАРСОНВАЛИЗАЦИЯ» недопустимо прикасаться к конической части электродо-держателя и резонатора, отделенной кольцом от его цилиндрической части. Рука, держащая электрододержатель или резонатор, во время проведения процедуры должна находиться на цилиндрической части электрододержателя или резонатора ниже резинового кольца;
- 8) **ВНИМАНИЕ:** вводить и выводить полостные электроды следует с осторожностью с использованием презерватива, поскольку стеклянные электроды хрупки, и их излом может вызвать травму у пациента;
- 9) **ЗАПРЕЩАЕТСЯ:** использовать кабель пациента с наконечниками, отличающимися по конструкции от прилагаемых к аппарату;
- 10) **ВНИМАНИЕ:** при дезинфекции корпуса аппарат должен быть отключен от сети;
- 11) **ЗАПРЕЩАЕТСЯ:** обслуживающему персоналу устранять какие-либо неисправности в аппарате;
- 12) **ЗАПРЕЩАЕТСЯ:** производить замену предохранителей при включенном в сеть аппарате;
- 13) при обнаружении неисправности обслуживающий персонал обязан отключить аппарат от сети и вызвать специалиста ремонтного предприятия системы «Медтехника».

7 ПОДГОТОВКА АППАРАТА К РАБОТЕ

- 7.1 Если аппарат длительное время находился в условиях температуры, резко отличающейся от рабочей, или повышенной влажности, выдержать аппарат в помещении при нормальных условиях в течение 6 часов.
- 7.2 Установить аппарат на рабочем месте.
- 7.3 Дезинфекцию наружной поверхности аппарата производить по № МУ 287-113 3 % раствором перекиси водорода по ГОСТ 177-88 с добавлением 0,5 % моющего средства по ГОСТ 25644-96 или другими дезинфицирующими средствами в соответствии с № МУ 287-113.
- 7.4 Электроды газоразрядные проходят цикл обработки в соответствии с № МУ 287-113 «Методические указания по дезинфекции, предстерилизационной очистке и стерилизации изделий медицинского назначения», состоящий из дезинфекции 4% раствором перекиси водорода по ГОСТ 177-88 путем полного погружения электродов, кроме электродов имеющих технологические отверстия в баллоне (вагинальный, десенный, ушной), предстерилизационной обработки (моющее средство по ГОСТ 25644 -96 в количестве 5 г., перекись водорода в количестве – 5 г., вода питьевая в количестве 990 мл.) или другими дезинфицирующими средствами в соответствии с № МУ 287-113. Электроды, имеющие контакт со слизистой оболочкой подвергают воздушному методу стерилизации при температуре 160±3 °С в соответствии с № МУ 287-113.
- 7.5 Гидрофильные прокладки и электроды из углеграфитовой ткани после каждой процедуры подвергнуть стирке с применением моющих средств по ГОСТ 25644-96 и дезинфекции кипячением в дистиллированной воде в медицинском кипятильнике при температуре (98 ±1) °С в течение 30 минут. Электроды выдерживают не менее 300 циклов дезинфекции.

4. Аппарат включен, все индикаторы аппарата светятся, но электрод не светится, нет искры при крайнем правом положении ручки «МОЩНОСТЬ» в режиме «ДАРСОНВАЛИЗАЦИЯ»	1) Неисправен электрод 2) Нет контакта колодки резонатора в штепсельном разъеме аппарата (рис.2) 3) Неисправен резонатор	1) Не вынимая электрод из резонатора, осторожно коснитесь им (3-4 раза) какого-либо металлического предмета, появившееся при этом свечение по всей длине электрода свидетельствует о его исправности, при отсутствии свечения электрод замените. 2) Проверить контакт колодки в штепсельном разъеме. При отсутствии контакта заменить штепсельный разъем, для этого необходимо открутить 2 крепежных винта, вынуть разъем из аппарата и заменить на новый. 3) Произвести визуальный осмотр места установки электрода в резонатор. В случае замытия контактных лепестков в резонаторе, устранить замытие.
---	--	--

13 СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВЫВАНИИ

Аппарат для лечения токами надтональной частоты, местной дарсонвализации, гальванизации и проведения электрофореза «УльтраДар-ЭМА-Н», заводской номер _____ упакован ОАО «Новоаннинский завод «ЭМА» согласно требованиям, предусмотренным в технических условиях ТУ 9444-015-34711238-2014.

14 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Аппарат для лечения токами надтональной частоты, местной дарсонвализации, гальванизации и проведения электрофореза «УльтраДар-ЭМА-Н», заводской номер _____ изготовлен и принят в соответствии с техническими условиями ТУ 9444-015-34711238-2014 и признан годным для эксплуатации.

Контролер ОТК _____

М.П.

- 12.3 Поиск отказов, повреждений и их последствий.
- 12.3.1 Путем опроса обслуживающего персонала установить обстоятельства возникновения неисправности, характер и внешние признаки ее проявления.
- 12.3.2 Произвести внешний осмотр аппарата, проверить его техническое состояние. При обнаружении неисправного элемента произвести его замену.
- 12.4 Перечень наиболее часто встречающихся или возможных неисправностей, вероятные причины и способы их устранения приведены в таблице 2.

Таблица 2 – Наименование, причины и методы устранения неисправности

Наименование неисправности, внешнее проявление и дополнительные признаки	Вероятная причина	Метод устранения
1. При включении клавиши «СЕТЬ» индикатор «ТАЙМЕР» не светится	Перегорели вставки плавкие	Заменить вставки плавкие. Для этого необходимо открутить 2 крепежных винта на задней верхней крышке, снять ее и произвести замену вставки плавкой. Сборку произвести в обратном порядке
2. При включении клавиши «СЕТЬ» индикаторы аппарата не светятся	Неисправен выключатель сети	Заменить выключатель сети. Для этого необходимо извлечь выключатель сети из корпуса аппарата, потянув на себя, проверить исправность выключателя ампервольтметром Ц 4311. В случае неисправности выключатель заменить на новый
3. Аппарат включен, все индикаторы аппарата светятся, но электрод не светится в режиме «УЛЬТРАТОНОТЕРАПИЯ»	1) Неисправен электрод. 2) Не зафиксирован штекер электрододержателя в выходном разъеме аппарата. 3) Обрыв провода электрододержателя	1) Заменить электрод 2) Зафиксировать штекер электрододержателя в выходном разъеме аппарата (до щелчка). 3) Проверить исправность провода при помощи ампервольтметра и устранить обрыв. Для этого необходимо снять изоляцию с провода на длину 10 мм и припаять к разъему

- Свинцовые электроды – протереть 1% раствором хлорамина или другими дезинфицирующими средствами в соответствии с № МУ 287-113.
- 7.6 Придать пациенту удобное положение, которое он мог бы без напряжения сохранить до окончания процедуры.
- 7.7 Подобрать назначенные врачом электроды в соответствии с процедурой.
- 7.8 Порядок наложения электродов из углеграфитовой ткани в режиме «ГАЛЬВАНИЗАЦИЯ»:
- а) смочить электроды из углеграфитовой ткани в теплом физиологическом растворе или растворе лекарственного вещества в соответствии с назначением врача;
 - б) вложить в электроды токоподводы так, чтобы они не выступали из кармана электродов;
 - в) наложить электроды с токоподводами на тело пациента, обнажив участок тела в зоне воздействия, и закрепите их (резиновыми жгутами, ремнями, лейкопластырем и т. д.). Электроды должны плотно прилегать к кожным покровам, смачивающая их жидкость не должна растекаться по коже;
 - г) подключить кабель пациента к выходным гнездам аппарата.
 - д) по окончании процедуры электроды промыть проточной водой для удаления из них продуктов электролиза, а затем прокипятить и высушить.
- 7.9 Порядок наложения плоских свинцовых электродов:
- а) смочить прямоугольные прокладки в теплом физиологическом растворе лекарственного вещества в соответствии с назначением врача;
 - б) вложить электроды в карманы прокладок так, чтобы электрод не выступал за край прокладки;
 - в) наложить прокладки с электродами на тело пациента и закрепите их резиновыми ремнями;
 - г) подключить вилки электродов к гнездам кабеля пациента.

8 ПОРЯДОК РАБОТЫ

- 8.1 Вставить вилку сетевого шнура в розетку сети. Нажатием клавиши «СЕТЬ», расположенной на задней стенке включить аппарат, при этом должны засветиться индикаторы «ТАЙМЕР» (рис.1, поз.5) и режима работы «ДАРСОНВАЛИЗАЦИЯ» (рис.1, поз.13) с частотой модуляции «50 Гц» (рис.1, поз. 3). Если на индикаторе «ТАЙМЕР» (рис.1, поз.5) высвечивается надпись «Ег», установить ручку регулятора «МОЩНОСТЬ» (рис.1, поз.9) в крайнее левое положение до щелчка, при этом на индикаторе «ТАЙМЕР» должно высветиться значение «00».

ВНИМАНИЕ: Электронное блокирующее устройство исключает появление тока в цепи пациента при включении аппарата, переключении режимов работы, переключении диапазонов выходного тока, после прерывания и восстановления сетевого питания, при превышении максимально допустимого тока пациента, если ручка регулятора «МОЩНОСТЬ» установлена не в крайнее левое положение до щелчка. О срабатывании защиты свидетельствует высвечивание на индикаторе «ТАЙМЕР» надписи «Ег».

- 8.2 Для выбора других режимов работы аппарата необходимо нажать соответствующую этому режиму кнопку.

8.3 Проведение процедур в режиме «ДАРСОНВАЛИЗАЦИЯ».

- 8.3.1 Вставить колодку резонатора в штепсельный разъем (рис.2, поз.1), расположенный на левой боковой стороне аппарата (рис.2).
- 8.3.2 Перед проведением процедуры дарсонвализации необходимо вставить стеклянный электрод в резонатор. Электрод следует вставлять в резонатор плавно и осторожно. Электрод установлен правильно, если пуклевки на его цоколе вошли в пазы резонатора. При правильной установке электрод не должен проворачиваться в резонаторе.

ВНИМАНИЕ: Запрещается вставлять и извлекать электрод из резонатора без предварительной установки ручки регулятора «МОЩНОСТЬ» (рис.1, поз.9) в крайнее левое положение до щелчка.

- 8.3.3 Нажатием кнопки (рис.1, поз.3) выбрать необходимую частоту модуляции «50 Гц» или «100 Гц».
- 8.3.4 Ручкой «УСТАНОВКА» таймера (рис.1, поз.7) установить необходимое время проведения процедуры.
- 8.3.5 Для начала процедуры нажать кнопку таймера «ПУСК/СТОП» (рис.1, поз.6), о начале отсчета времени проведения процедуры свидетельствует мигание точки в нижнем углу индикатора «ТАЙМЕР» (рис.1, поз.5).
- 8.3.6 Только после соприкосновения электрода с телом пациента ручку регулятора «МОЩНОСТЬ» (рис.1, поз.9) установить в положение, соответствующее требуемой интенсивности проведения процедуры, (возникновение слабого свечения по длине электрода и характерное потрескивание свидетельствует об исправности электрода).
- 8.3.7 При накожной методике подвергается воздействию участок кожи предварительно высушить и припудрить, например, тальком. Медленно и плавно перемещать электрод на заданном участке кожи, не слишком надавливая на нее, но и не отрывая электрод от поверхности кожи.
- 8.3.8 При полостной методике электрод удерживать в полости на протяжении всей процедуры.
- 8.3.9 По истечении установленного времени процедуры подается звуковой сигнал (при необходимости его можно отключить нажатием кнопки таймера «ПУСК/СТОП») (рис.1, поз.6) и автоматически отключается выходное напряжение. Для завершения процедуры до истечения установленного времени необходимо нажать кнопку таймера «ПУСК/СТОП» (рис.1, поз.6), при этом на индикаторе «ТАЙМЕР» (рис.1, поз.5) высвечивается надпись «Ег».
- 8.3.10 Для проведения следующей процедуры необходимо установить ручку регулятора «МОЩНОСТЬ» (рис.1, поз.9) в крайнее левое положение до щелчка, при этом на индикаторе «ТАЙМЕР» должно высветиться значение «00» и выполнить действия указанные в п. 8.2.
- 8.4 Проведение процедур в режиме «УЛЬТРАТОНОТЕРАПИЯ»**
- 8.4.1 Нажатием кнопки (рис.1, поз.10) перевести аппарат в режим работы «УЛЬТРАТОНОТЕРАПИЯ», при этом загорается индикатор (рис.1, поз.11).
- 8.4.2 Вставить штекер электрододержателя в разъем (рис.3, поз.1) расположенный на правой боковой стороне аппарата (рис.3).
- 8.4.3 Перед проведением процедуры необходимо вставить стеклянный электрод в электрододержатель. Электрод следует вставлять в электрододержатель осторожно, при этом прилагаемое усилие не должно превышать 5 кгс,

правое положение, соответствующее максимальной мощности аппарата. Напряжение на входы осциллографа и частотомера должно подаваться посредством емкостной связи с высоковольтным проводом нагрузки при расстоянии связи не более 3 см. Схема подключения приборов и нагрузки указана в приложении Г рис. 1, изображение формы ВЧ колебаний в приложении Г рис. 3. Частота должна соответствовать $(22 \pm 1,65)$ кГц.

- 11.5.4 Проверку наибольшей выходной мощности в режиме «УЛЬТРАТОНОТЕРАПИЯ» производить путем измерения тока нагрузки ампервольтметром Ц4311, включенным между нагрузкой и землей. При измерении аппарат должен быть, нагружен на эквивалент нагрузки последовательно включенных: конденсатор К15У-1а-6 кВ 47 пФ $\pm 10\%$ - 7 квар. и резистор ТВО-20-15 кОм $\pm 5\%$ (см. приложение Г рис. 2). Выходная мощность определяется по формуле: $P_{\text{вых}} = I_n^2 \cdot R_n$, где $P_{\text{вых}}$ - выходная мощность, Вт; I_n - ток нагрузки, А; R_n - активное сопротивление нагрузки, Ом.
- Наибольшая выходная мощность аппарата должна соответствовать (10 ± 2) Вт.
- 11.5.5 Проверку максимальной величины тока в цепи пациента в режиме «ГАЛЬВАНИЗАЦИЯ» производить с помощью контрольного миллиамперметра постоянного тока класса точности не ниже 1,5, включенного последовательно с сопротивлением нагрузки равной $500 \text{ Ом} \pm 25 \text{ Ом}$. При максимальном положении ручки регулятора выходного тока «МОЩНОСТЬ» показания контрольного миллиамперметра должны соответствовать $50 \text{ мА} \pm 5 \text{ мА}$.
- 11.5.6 Проверку переключений диапазонов тока в режиме «ГАЛЬВАНИЗАЦИЯ» производить при крайнем левом положении ручки регулятора выходного тока «МОЩНОСТЬ». Проверка наличия заданных диапазонов тока производится по индикатору выходного тока «УРОВЕНЬ МОЩНОСТИ», последовательно нажимая кнопку переключения диапазонов тока.

12 ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ

- 12.1 Общие указания
- 12.1.1 Текущий ремонт аппарата производится с целью восстановления его работоспособности при отказе или неисправности.
- 12.1.2 Ремонт должен производиться специализированным ремонтным предприятием.
- 12.2 Меры безопасности.
- 12.2.1 При ремонте аппарата необходимо соблюдать следующие правила предосторожности:
- к ремонту аппарата должны допускаться лица, прошедшие специальное обучение и имеющие группу допуска не ниже III;
 - число лиц, занятых ремонтом, должно быть не менее двух;
 - рабочее место должно быть снабжено диэлектрическим ковриком;
 - рабочий инструмент должен иметь изолированные ручки;
 - замена неисправных элементов должна производиться только при отключенном от сети аппарате.

11 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

11.1 Общие указания.

11.1.1 Техническое обслуживание проводится с целью обеспечения бесперебойной работы, повышения эксплуатационной надежности и эффективности использования аппарата.

11.1.2 Техническое обслуживание осуществляется специализированными ремонтными предприятиями.

11.2 Меры безопасности при техническом обслуживании.

11.2.1 При техническом обслуживании необходимо руководствоваться разделом «Указания мер безопасности» и «Указание мер безопасности при ремонте».

11.3 Периодичность технического обслуживания.

11.3.1 Ежедневно внешнюю поверхность аппарата протирайте сухой или слегка влажной тканью, не допуская попадания влаги в аппарат. Аппарат при этом должен быть отключен от сети.

11.3.2 Для обеспечения нормальной работы аппарата необходимо проводить профилактический осмотр не реже одного раза в три месяца и проверку работоспособности не реже одного раза в год.

11.4 Порядок технического обслуживания.

11.4.1 Профилактический осмотр производится в следующей последовательности:

- отключить аппарат от сети, проверить целостность корпуса;
- проверить исправность сетевого шнура, надежность крепления выходных разъемов для подключения резонатора и электрододержателя и их исправность;
- проверить исправность провода резонатора и электрододержателя при помощи ампервольтметра и прочность соединения цоколя каждого электрода из комплекта аппарата опробованием рукой.

11.5 Проверка работоспособности аппарата.

11.5.1 Проверку частоты высокочастотных импульсно-модулированных колебаний в режиме «ДАРСОНВАЛИЗАЦИЯ» производить индикатором частоты (см. приложение Б) с погрешностью в пределах $\pm 0,5\%$ при нагрузке десенным и большим ректальным электродами, находящимися в воде своей рабочей частью. Сосуд с водой должен быть металлическим, соединенным с корпусом аппарата через емкость (80 ± 10) пФ. Частота должна соответствовать $(110 \pm 8,25)$ кГц.

11.5.2 Проверку максимальной величины тока на выходе аппарата в режиме «ДАРСОНВАЛИЗАЦИЯ» производить по схеме приложения В. Соберите схему для измерения выходного тока аппарата с одним из электродов, например, с большим грибовидным. Включите аппарат по методике, указанной в разделе 7. Ручку регулятора «МОЩНОСТЬ» поверните до упора вправо и замерьте максимальную величину тока на выходе аппарата. Она должна соответствовать $(4 \pm 1,2)$ мА при любых электродах, кроме ушных, носовых и десенных. Максимальная величина тока при ушных, носовых и десенных электродах должна быть (3 ± 1) мА.

11.5.3 Проверку частоты и непрерывности ВЧ колебаний в режиме «УЛЬТРАНОТЕРАПИЯ» производить с помощью частотомера и осциллографа. Нагрузкой аппарата должен быть конденсатор К15У-1а-6 кВ-100 пФ $\pm 10\%$ - 7 квар.

Ручка выходного тока «МОЩНОСТЬ» должна быть установлена в крайнее

направленной вдоль оси электрододержателя. Электрод установлен правильно, если пуклевки на его цоколе вошли в пазы электрододержателя.

ВНИМАНИЕ: Запрещается вставлять и извлекать электрод из электрододержателя без предварительной установки ручки регулятора «МОЩНОСТЬ» в крайнее левое положение до щелчка.

8.4.4 Ручку регулятора (рис.1, поз.9) «МОЩНОСТЬ» установить в крайнее левое положение до щелчка.

8.4.5 Ручкой «УСТАНОВКА» таймера (рис.1, поз.7) установить необходимое время проведения процедуры.

8.4.6 Для начала процедуры нажать кнопку таймера «ПУСК/СТОП» (рис.1, поз.6), о начале отсчета времени проведения процедуры свидетельствует мигание точки в нижнем углу индикатора «ТАЙМЕР» (рис.1, поз.5).

8.4.7 Только после соприкосновения электрода с телом пациента ручку регулятора «МОЩНОСТЬ» установить в положение, соответствующее требуемой интенсивности проведения процедуры, (возникновение слабого свечения по длине электрода и характерное потрескивание свидетельствует об исправности электрода).

8.4.8 При кожной методике подвергаемый воздействию участок тела пациента предварительно высушить и припудрить, например, тальком. Медленно и плавно перемещать электрод, не слишком надавливая, но и не отрывая электрод от поверхности тела.

8.4.9 При полостной методике электрод удерживать в полости на протяжении всей процедуры.

8.4.10 По истечении установленного времени процедуры подается звуковой сигнал (при необходимости его можно отключить нажатием кнопки таймера «ПУСК/СТОП» (рис.1, поз.6) и автоматически отключается выходное напряжение. Для завершения процедуры до истечения установленного времени необходимо нажать кнопку таймера «ПУСК/СТОП», при этом на индикаторе «ТАЙМЕР» (рис.1, поз.5) высвечивается надпись «Ег».

8.4.11 После окончания процедуры вывести ручку регулятора «МОЩНОСТЬ» (рис.1, поз.9) в крайнее левое положение до щелчка и отвести электрод от пациента.

8.4.12 Для проведения следующей процедуры необходимо выполнить действия указанные в п. 8.4.5.

8.5 Проведение процедур в режиме «ГАЛЬВАНИЗАЦИЯ».

8.5.1 Нажатием кнопки (рис.1, поз.14) перевести аппарат в режим работы «ГАЛЬВАНИЗАЦИЯ», при этом загорается индикатор выходного тока «УРОВЕНЬ МОЩНОСТИ» (рис.1, поз.16) и индикатор диапазона тока от «0-5 мА» (рис.1, поз.15). Для смены диапазона выходного тока от «0-50 мА» необходимо повторно нажать на кнопку (рис.1, поз.15) выбора режима работы «ГАЛЬВАНИЗАЦИЯ».

8.5.2 Наложить и зафиксировать электроды на подвергаемый воздействию участок тела пациента.

ВНИМАНИЕ: Запрещается производить наложение электродов и их смену во время проведения процедуры!

- 8.5.3 Ручкой «УСТАНОВКА» таймера (рис.1, поз.7) выбрать заданную врачом продолжительность процедуры.
- 8.5.4 Для начала отсчета времени процедуры нажать кнопку таймера «ПУСК/СТОП» (рис.1, поз.6).
- 8.5.5 Плавным вращением ручки регулятора выходного тока «МОЩНОСТЬ» (рис.1, поз.9) по часовой стрелке установить необходимую величину тока, при этом у пациента под электродами появляется ощущение тепла или покалывания.
- 8.5.6 По истечении установленного времени процедуры подается звуковой сигнал (при необходимости его можно отключить нажатием кнопки таймера «ПУСК/СТОП») и автоматически отключается выходной ток. Для завершения процедуры до истечения установленного времени необходимо нажать кнопку таймера «ПУСК/СТОП» (рис.1, поз.6), при этом на индикаторе «ТАЙМЕР» (рис.1, поз.5) высвечивается надпись «Ег».
- 8.5.7 По окончании процедуры установить ручку регулятора «МОЩНОСТЬ» (рис.1, поз.9) в крайнее левое положение до щелчка.
- 8.5.8 Снять электроды с пациента. Аппарат готов к проведению следующей процедуры.
- 8.5.9 По окончании работы выключить аппарат нажатием клавиши «СЕТЬ», расположенной на задней стенке аппарата. Вынуть сетевой шнур из розетки.

9 ПОКАЗАНИЯ ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ АППАРАТА

9.1 В режиме «ДАРСОНВАЛИЗАЦИЯ»:

- дерматология и косметология: угревая сыпь, выпадение волос, зуд кожи, псориаз, экземы, лишай, себорея, нейродермиты, герпетические высыпания, эритема, лейшманиоз кожи, удаление бородавок.
- неврология: невралгии, истерия, невралгии, воспаление нервных сплетений, нейро-церкулярная дистония, миопатия, остеохондроз позвоночника.
- хирургия: облитерирующие и атеросклеротические заболевания сосудов, варикозная болезнь, наружные трофические язвы, ожоги, обморожения, инфицированные раны и послеоперационные рубцы, панариций, лимфостаз, наружный геморрой.
- урология: простатит, цистит.
- гинекология: вагинизм, зуд вульвы, кольпит, крауроз вульвы, эндоцервицит, эрозии матки.
- лор заболевания: неврит слухового нерва, отосклероз, ринит вазомоторный, ринит хронический, ринит сухой передний.
- стоматология: гингивит, парадонтопатии, глосалгия, стоматит.

9.2 В режиме «УЛЬТРАТОНОТЕРАПИЯ»:

- заболевания периферической нервной системы: неврит, невралгии, нейропатии, полинейропатии, остеохондроз позвоночника;
- дерматология: воспалительные заболевания кожи, себорейная алопеция, экзема, кожные аллергические реакции, угревая сыпь, склеродермия, опоясывающий лишай, нейродермит,
- хирургические патологии: инфицированные раны, трофические язвы, инфильтраты,

- лимфаденит, начальные стадии облитерирующих заболеваний сосудов конечностей,
- стоматология: периостатит, альвеолит, абсцесс и флегмона в стадии разрешения, послеоперационные инфильтраты, гингивит, парадонтоз и др;
 - оторинология: воспалительные заболевания носа, наружного уха;
 - заболевания женских половых органов: хронические воспалительные заболевания матки, придатков, околосадоваточной клетчатки - хронический сальпингоофорит с явлениями инфантилизма, дисфункция яичников, эрозия шейки матки, кольпит,
 - заболевания простаты.

9.3 В режиме «ГАЛЬВАНИЗАЦИЯ»:

- поражение периферической нервной системы инфекционного, токсического и травматического происхождения – плекситах, невритах, невралгиях, радикулитах;
- заболевания опорно-двигательного аппарата;
- некоторые заболевания центральной нервной системы, нарушения мозгового кровообращения, последствия травм головного и спинного мозга;
- заболевания ЖКТ;
- заболевания женских половых органов.

10 ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

10.1 В режиме «ДАРСОНВАЛИЗАЦИЯ»:

- злокачественные новообразования, тяжело протекающие сердечно-сосудистые заболевания, системные заболевания крови, индивидуальная непереносимость тока.

10.2 В режиме «УЛЬТРАТОНОТЕРАПИЯ»:

- новообразования, декомпенсация сердечно-сосудистой деятельности, системные болезни крови, кровотечение или подозрение на него, активный туберкулез, индивидуальная непереносимость тока.

10.3 В режиме «ГАЛЬВАНИЗАЦИЯ»:

- острые гнойные воспалительные заболевания;
- индивидуальная непереносимость гальванического тока или вводимого лекарственного вещества;
- сердечная недостаточность II—III степени;
- гипертоническая болезнь III стадии;
- лихорадка;
- тяжелая форма бронхиальной астмы;
- дерматит или нарушение целостности кожи в местах наложения электродов;
- злокачественные новообразования.

Учитываются противопоказания для лечебного вещества.

Вещества, используемые при электрофорезе, по способу введения разделяются

на:

- отрицательно заряженные, вводимые с отрицательного полюса — катода (бромиды, йодиды, никотиновая кислота и другие);
- положительно заряженные, вводимые с положительного полюса — анода (ионы металлов — магния, калия, кальция);
- вводимые как с анода, так и с катода (гумизоль, бишофит и другие).